

Infúzne roztoky

Plastový vak

ENVIBAG®



NÁVOD na manipuláciu s vakom


① KONTROLA PRED PODANÍM

- a. Skontrolujte vak, či nedochádza k unikaniu tekutiny. Pokiaľ zistíte narušenie celistvosti vaku, vak s roztokom zlikvidujte, keďže môže byť narušená jeho sterilita.
- b. Skontrolujte, či roztok opticky spĺňa charakteristiky uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Pokiaľ nie, roztok zlikvidujte.

② PRÍPRAVA NA PODANIE

Na prípravu a podávanie používajte sterilný materiál.

- a. Zaveste vak na stojan alebo ho položte na vodorovnú plochu.
- b. Modrý plastový kryt z výstupného portu (infúzneho portu) odstráňte vylomením.
- c. Gumená zátka portu je sterilná, preto nie je potrebná jej dezinfekcia. Pripojte hrubú perforačnú ihlu infúzneho setu do infúzneho portu.
- d. Ďalej postupujte podľa návodu priloženého k infúznemu setu (naplnenie setu a podávanie roztoku).

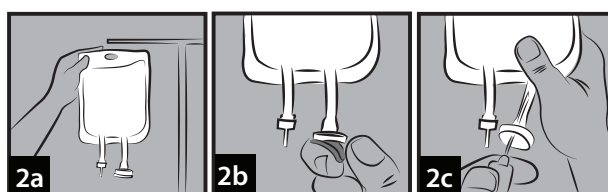


VAROVANIE

Vždy skontrolujte „Súhrn charakteristických vlastností lieku“, či je možné pridať liečivo do plastového vaku (PP).

③ PRIDANIE LIEČIVA DO ROZTOKU

Pridanie liekov pred podaním

- a. PP vak: Odlomte priesvitný kryt na injekčnom porte. Gumená zátka je sterilná, preto nie je potrebná jej dezinfekcia.
- b. Prepichnete injekčný port a pridajte liečivo. Odporúčaná veľkosť ihly: 19 G (1,10 mm) až 22 G (0,70 mm)
- c. Dôkladne premiešajte obsah vaku.

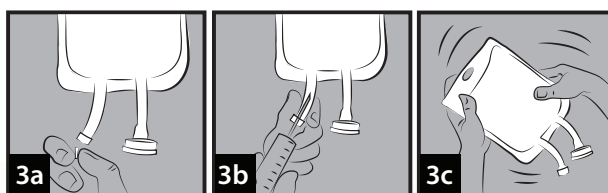

Upozornenie: Riadťe sa pokynmi likvidácie vakov v zdravotníctve (obsah pridaného liečiva).